

LivaNova

Health innovation that matters

グリセリンフリー

血液濃縮器

CorrectaFlow

コレクタフロー

CF11/CF04



血液濃縮器

CorrectaFlow

コレクタフロー

CF11/CF04



CF11

CF04

グリセリンフリーで
スピーディーなセットアップ！

セットアップが簡単

- グリセリンフリーのポリエーテルスルホン膜のため、グリセリンの洗浄操作が不要。(プライミング操作は必要です。)
- 洗浄終了時の再接続が不要で、汚染の危険性を回避できる。

ポリエーテルスルホン膜の 優れた安定性と生体適合性


高い除水性能により迅速な水分管理が可能

- 一時的な高度希釈状態の防止と省力化が可能。
- 電解質補正にともなう大量除水にも対応可能。
- MUF (Modified Ultrafiltration method) 施行時間の短縮。

血液有用成分の保持

- 血球成分、アルブミン成分及び凝固因子成分等を保持し、輸血量の低減が期待できる。

性 能

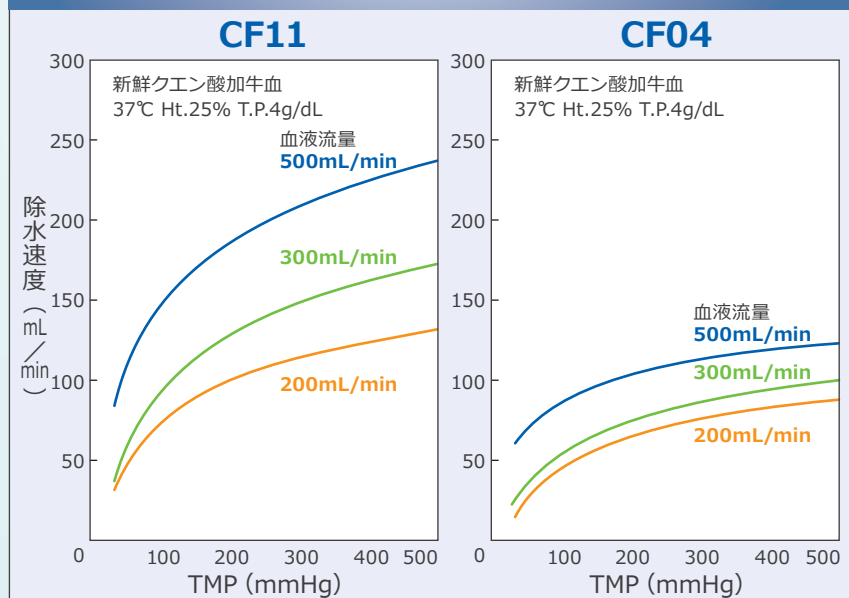

血液流量、ヘマトクリット、蛋白濃度、その他臨床パラメーターにより、限外濾過速度は大きく変化しますので、これらのことを十分理解しておく必要があります。

仕 様

項 目	CF11	CF04
有効膜面積(m ²)	1.1	0.4
血液充填量(mL)	62	29
中空糸材質	ポリエーテルスルホン	
最大使用圧力	66.7 kPa(500mmHg)	
滅菌方法	エチレンオキサイドガス滅菌	
品 番	JK-HCCF11	JK-HCCF04
販 売 名	コレクタフロー	
医療機器承認番号	21400BZZ00061A01	

総販売元

リヴァノヴァ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2-11-1
Tel. 03-3595-7630 (代) Fax. 03-3595-7631

製造販売元

株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島県広島市中区加古町12-17