



熱交換器CSC14

CSC 14 CARDIOPLEGIA HEAT EXCHANGER THE VISIBLE SOLUTION

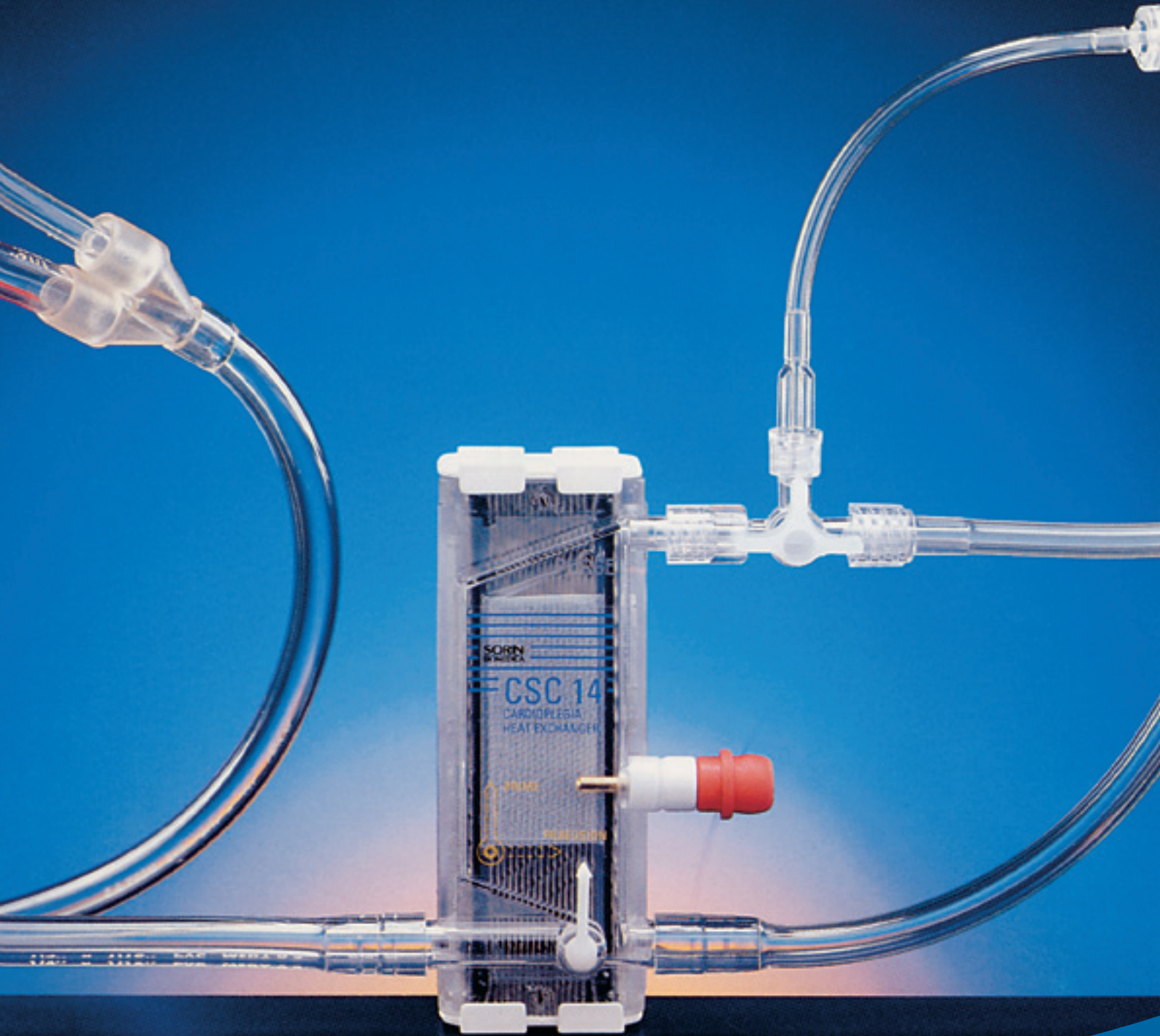

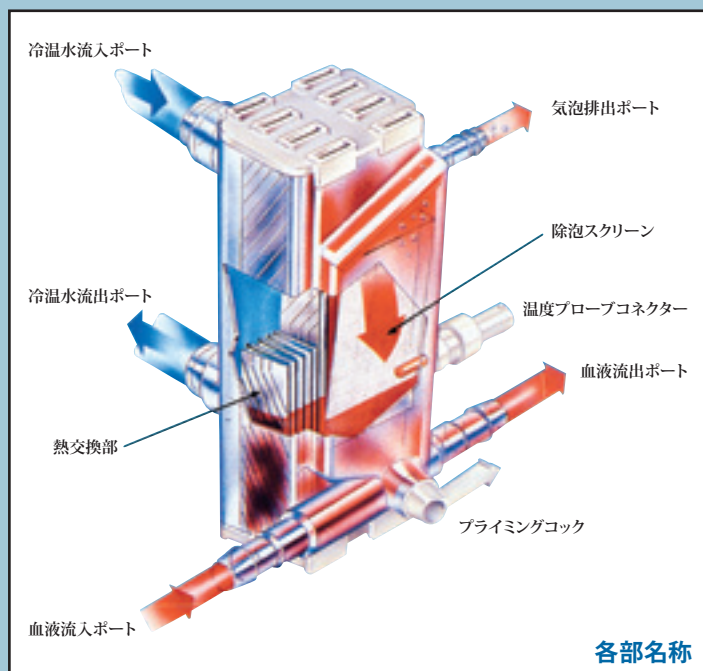

■ オーダーガイド

	製品番号	製品名
熱交換器	P3740/J	熱交換器 CSC14
ホルダー	050137	HSC ホルダー D610
温度プローブ	09026	温度プローブ

■ 仕様

最大血流量	2,500mL/min
充填量	30mL
血液側最大使用圧力	100kPa (750mmHg)
冷水側最大使用圧力	200kPa (1.97atm)
熱交換部材質	ステンレススチール
熱交換部面積	0.05 m ²
除泡スクリーン材質	ポリエステル
除泡スクリーン孔径	150μm
血液流入 / 流出口	外径 6.35mm (1/4 インチ)
冷水流入 / 流出口	外径 12.7mm (1/2 インチ)
付属品：パージライン（一方弁、三方活栓付き）	

販売名：ディデエコ熱交換器 CSC14
 医療機器認証番号：21600BZG00011000
 外国特例認証取得者：リヴァノヴァ・イタリア社：イタリア



■ 優れた性能と操作性

低プライミング&ハイフロー

プライミングボリューム **30mL** のコンパクト設計。
 最大流量 **2,500mL/min** まで対応可能。

高い熱交換能

熱交換面積は0.05m²。血液接触面積を抑えながら高い熱交換能を実現。

プライミングコックの採用

プライミング時のエア抜きを容易にします。

使いやすいポートレイアウト

直線上に配置されたポートで回路レイアウトがシンプルになります。



■ 安全性

優れた視認性

血液側が熱交換器前面の一方方向から確認できます。

バブルトラップ機能

150μmのポリエステル除泡スクリーンで気泡をトラップ。
 さらに一方弁のパージラインも標準装備。

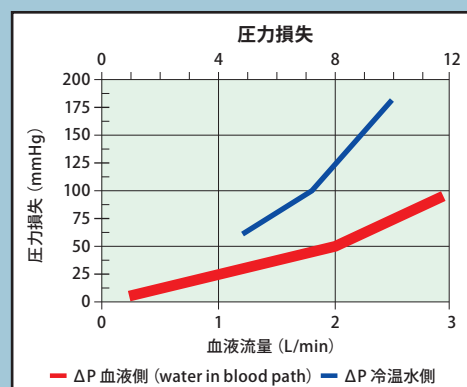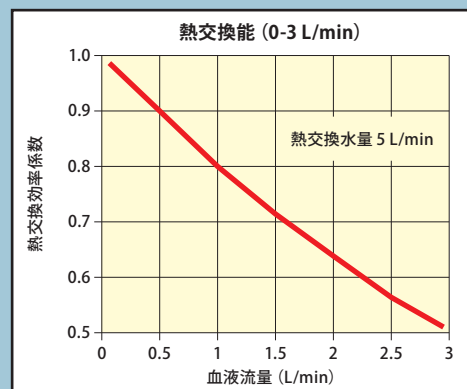

選任製造販売業者

リヴァノヴァ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2-11-1
 Tel: 03-3595-7630(代) Fax: 03-3595-7631